



WalkMed


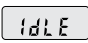





Bombas ambulatorias 350VL

Tarjeta de referencia rápida del paciente

Mantenga esta tarjeta en su bolsa de viaje o consérvela con usted. Si necesita una guía completa consulte las instrucciones que le ha dado su proveedor de atención médica.

Instrucciones breves

Para empezar la administración de medicamentos:



1. Pulse la tecla ENCENDER  para encender la bomba. La pantalla mostrará .
2. Pulse la tecla EMPEZAR  para empezar la administración del medicamento. La luz   empezará a parpadear de color verde. La pantalla cambiará entre los modos de índice de administración del medicamento  y el volumen administrado .
3. Coloque la cubierta delantera en la bomba.

Para detener la administración de medicamentos:

1. Pulse la tecla DETENER . La bomba mostrará en la pantalla .

Para cambiar la pila:

Utilice una pila alcalina de 9 voltios. Se recomienda Duracell® MN 1604.

1. Pulse la tecla DETENER  para apagar la bomba .
2. Retire la pila. Espere aproximadamente 15 segundos antes de instalar la nueva pila.
3. Siga las instrucciones anteriores para **Empezar la administración de medicamentos.**

Información adicional: _____

Representante autorizado:

Priory Analysts Ltd.
The Atrium, Park Street West
Luton, LU1 3BE, Reino Unido

Fabricado por:

WalkMed Infusion LLC

96 Inverness Drive East, Unit J
Englewood, Colorado 80112

Phone: (303) 420-9569 Fax: (303) 420-4545

CE1275



Tabla de Solución de Problemas

Nivel de Revisión de Software 2.0 [0.1 – 0.9]

1. Haga coincidir el mensaje que usted ve en la pantalla de su bomba con el **Mensaje en la pantalla** en la columna izquierda que se muestra a continuación.
2. Siga la **Acción correctiva** que se indica en la columna derecha.
3. Si no puede corregir el problema siguiendo la **Acción correctiva**, siga las instrucciones de su proveedor de atención médica.

() _____ - _____

Mensaje en la Pantalla	Sonidos / Luces	Condición	Acción correctiva
	Sonidos: Pitido lento Luz: Amarilla parpadeante	No suministra	Pulse la tecla para empezar la entrega. Pulse la tecla para silenciar la alerta durante 5 minutos.
	Sonidos: Pitido lento Luz: Amarilla parpadeante	Pila Baja	Pulse la tecla para silenciar la alerta. Reemplace la pila dentro de los siguientes 30 minutos.
	Sonidos: Tono continuo Luz: Roja continua	Pila descargada	Retire la pila descargada para silenciar la alarma. Reemplace la pila. Pulse la tecla para encender la bomba. Pulse la tecla para reiniciar.
	Sonidos: Tono continuo Luz: Roja parpadeante	La barra de sujeción está abierta	Pulse la tecla para silenciar la alerta. Cierre la barra de sujeción. Pulse la tecla para reiniciar.
	Sonidos: Tono continuo Luz: Roja parpadeante	Oclusión de tubo intravenoso	Automático: Revise el sistema de tubos para buscar tubos retorcidos y corríjalos. La bomba reanudará la entrega cuando la línea esté despejada. Manual: Pulse la tecla para silenciar la alerta. Revise si hay tubos retorcidos en el sistema de tubos y corríjalos. Pulse la tecla para reiniciar.
	Sonidos: Tono continuo Luz: Roja continua	Mal funcionamiento del sistema	Anote el Mensaje de error de la pantalla. Retire la pila para silenciar la alarma. Saque de servicio la bomba. Comuníquese con Soporte e informe sobre el Mensaje de Error
Desplazamiento 	Sonidos: Pitido lento Luz: Amarilla parpadeante	Se alcanzó el límite del volumen total	La bomba continuará entregando al flujo KVO (Mantener la vena abierta) por aproximadamente 4 horas. Se oirá un pitido de alerta cada 30 minutos.
	Sonidos: Pitido rápido Luz: Roja parpadeante	Fin de KVO (Mantener la vena abierta)	Pulse la tecla para silenciar la alerta. Pulse la tecla para apagar la bomba.